



**FICHE
PRODUIT**



CR-6000

STATION DE SERTISSAGE ET DESSERTISSAGE ÉLECTRONIQUE

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

Notre station de sertissage CR-6000 allie l'ajustage précis de la force avec un sertissage ultra rapide et reproductible, directement dans les portoirs de flacons.

- Adapté pour tous les modèles de fermetures du marché
- Station à 3 axes, ergonomique et facile d'usage.
- Recommandée pour la préparation intensive d'échantillons
- Alimentation intégrée
- Compteur/totalisateur
- Ecran couleur tactile
- Surface de travail éclairée par LED et sécurisé par des barrières IR
- Fiable et robuste
- Très grande précision de guidage
- Sertissage ultra rapide, reproductible et sécurisé directement dans les portoirs de flacons.
- Sertissage sécurisé et reproductible par simple pression du bouton départ cycle
- Force ajustable de manière graduelle en fonction du type de capsules et de la dureté des joints
- Changement du type de tête facile et rapide sans l'utilisation d'outils
- Ne nécessite pas l'utilisation d'air comprimé ou le chargement d'accu électrique
- Ne refoule pas d'air contaminé par des traces d'huiles ou d'hydrocarbures dans la zone de travail confinée
- Remplacement du vérin électrique simple et rapide
- Fabrication sur mesure en fonction des besoins du client, sur demande
- Fabrication française



Le CR-6000 est une station de sertissage électronique à hautes performances.

Doté d'une très grande rapidité et précision, le CR-6000 est également polyvalent, stable, et permet d'ajuster avec précision la force de sertissage. Le sertissage s'effectue directement sur le portoir de flacons.

Les têtes interchangeables pour le sertissage se montent rapidement sans outils et sont spécialement adaptées pour le sertissage de capsules en aluminium et en acier inoxydable avec un diamètre 8, 11, 13 et 20 mm.

Des têtes spéciales sont disponibles sur demande (exemple : tête pour capsules flip-off de 13 et 20mm). Le réglage de la force peut être ajusté de manière progressive sur le display en fonction de la dureté des joints et du type de capsules employées.

Le CR-6000 est compatible avec des capsules standards en aluminium, des capsules de sécurité utilisées en Headspace, les capsules magnétiques en tôle d'acier ainsi que les capsules flip-off.

Le système permet le sertissage complet de toutes les positions du portoir ou le sertissage prioritaire des flacons sélectionnés.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

DESCRIPTION	NR. CAT
Station de sertissage électronique modèle Crimptronic CR-6000 (Station complète sans tête de sertissage)	CR-6000
TETE DE SERTISSAGE	NR. CAT
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 8 mm Ø	TS08
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 11 mm Ø	TS11
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 13 mm Ø	TS13
Tête de sertissage pour capsules de 13 mm Ø flip-off	TS13FLO
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 20 mm Ø	TS20
Tête de sertissage pour capsules de 20 mm Ø flip-off	TS20FLO
OPTIONS LES PLUS DEMANDÉES	NR. CAT
Système de transport, guidage et positionnement électrique pour le montage automatique des capsules Précisez la taille des capsules à la commande	CT-6000



Force réglable en fonction du type de capsules et de joints



Stabilité accrue et déplaçable




Une simple alimentation 230V/50Hz suffit



Cadence moyenne 900 Flacons / heure



Sertissage pour tous types et tailles de flacons

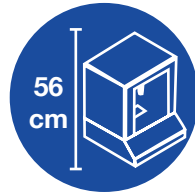

Compacte.
S'installe sur table ou paillasse
H 56 cm x l 43 cm x P 49 cm



Permet de sertir



Fabrication Française



Machine réparable 10 ans



Rapport et protocole de qualification d'installation & opérationnelles (QI/QO)

COMPATIBILITÉ DES OPTIONS						
OPTION	DESCRIPTION	CR-1000	CR-4000	CR-5000	CR-6000	...
Option «A»	Afficheur LCD avec 5 niveaux réglables et compteur totalisateur		X			
Option «C»	Compteur/totalisateur de cycle électrique		X			SC-4000
Option «D»	Détrompeur à targette monté sur vis à bille à double position pour deux tailles de flacons			X		
Option «E»	Boîtier spécial en acier inox étanche IP65 (poussière et jet d'eau) étanchéité de la tête à sertir par double joint torique, display tactile IP65 pour le réglage et la présélection des forces de sertissages, compteur totalisateur, système de réglage automatique de la hauteur de sertissage grâce à un chariot guidé avec une vis trapézoïdale, gestion de la température interne.			X		
Option «I»	Boîtier en acier inox 316 L	X	X	X	X	SC-4000
Option «L»	Ouverture large de la zone de travail. Particulièrement adapté pour l'utilisation de flacons de 50 et 100 ml, la zone est sécurisée par 3 capteurs IR		X			SC-4000
Option «T»	Sonde de température		X	X		SC-4000
Option «USB»	Pilotage de la machine par automate avec liaison USB Enregistrement des courbes de forces Paramétrage et sauvegarde des différents niveaux de forces en fonction du type de fermeture. Statistique et suivi du nombre de sertissages et dessertissages réalisés, de la force moyenne appliquée, du temps d'utilisation Toutes autres fonctions réalisable sur demande (Statistiques, cycle de fonctionnement, affichage...)		X			
Option «V»	Ventilateur (conseillé pour un usage intensif)		X	X		SC-4000
CT-6000	Système de transport, guidage et positionnement électrique pour le montage automatique des capsules				X	
Option «R»	Mise en réseau avec un serveur pour le suivi statistique des lots de fabrication			CR-5000S	CR-6000	
Option «PCD»	Prise de contrôle à distance			CR-5000S	CR-6000	RO-4000

TETE DE VISSAGE POUR SC-4000	NR. CAT
Tête de vissage pour col DIN 18	TV18
Tête de vissage pour col DIN 20	TV20
Tête de vissage pour col DIN 22	TV22
Tête de vissage pour col DIN 24	TV24

TETE DE SERTISSAGE	NR. CAT	CACHE*
Tête de sertissage pour capsule de 8 mm Ø	TS08	CAO08S
Tête de sertissage pour capsule de 11 mm Ø	TS11	CAO11S
Tête de sertissage pour capsule de 13 mm Ø	TS13	CAO13S
Tête de sertissage pour capsule de 13 mm Ø flip-off débordante	TS13FLO	CAO13FLOS
Tête de sertissage pour capsule de 13 mm Ø flip-off à languette	TS13FTU	CAO13FTUS
Tête de sertissage pour capsule de 13 mm Ø flip-off non-débordante	TS13FS	CAO13FSS
Tête de sertissage pour capsule de 20 mm Ø	TS20	CAO20S
Tête de sertissage pour capsule de 20 mm Ø flip-off débordante	TS20FLO	CAO20FLOS
Tête de sertissage pour capsule de 20 mm Ø flip-off à languette	TS20FTU	CAO20FTUS
Tête de sertissage pour capsule de 20 mm Ø flip-off non-débordante	TS20FS	CAO20FSS
Tête de sertissage pour capsule de 28 mm Ø	TS28	CAO28S
Tête de sertissage pour capsule de 32 mm Ø	TS32	CAO32S
Tête de sertissage pour capsule de 32 mm Ø flip-off débordante	TS32FLO	CAO32FLOS
Tête de sertissage pour capsule de 32 mm Ø flip-off non-débordante	TS32FS	CAO32FSS



Ajoutez «-I» après la référence du cache standard pour bénéficier de la **finition Inox**

* **Remarque** : Accessoire | Cache de sécurité pour tête de sertissage/dessertissage.

L'utilisation ou non d'un cache n'influencera pas la qualité de sertissage mais vous permettra une utilisation en toute sécurité.

TETE DE DESSERTISSAGE	NR. CAT	CACHE*
Tête de dessertissage pour capuchons de 08 mm Ø	TD08	CAO08D
Tête de dessertissage pour capuchons de 11 mm Ø	TD11	CAO11D
Tête de dessertissage pour capuchons de 13 mm Ø	TD13	CAO13D
Tête de dessertissage pour capuchons de 20 mm Ø	TD20	CAO20D

TETE DE MAINTIEN POUR ROLLTRONIC RO-4000	NR. CAT
Tête de maintien pour capsule Ø 13 mm	TM-RO-13
Tête de maintien pour capsule Ø 13 mm flip-off débordante	TM-RO-13FLO
Tête de maintien pour capsule Ø 13 mm flip-off non débordante	TM-RO-13FS
Tête de maintien pour capsule Ø 13 mm flip-off surface plane	TM-RO-13OVB
Tête de maintien pour capsule Ø 20 mm	TM-RO-20
Tête de maintien pour capsule Ø 20 mm flip-off débordante	TM-RO-20FLO
Tête de maintien pour capsule Ø 20 mm flip-off non débordante	TM-RO-20FS
Tête de maintien pour capsule Ø XX Réalisation sur demande suivant diamètre et spécificité de la capsule	TM-RO- XX

ADAPTATEUR FLACON POUR ROLLTRONIC RO-4000	NR. CAT
Adaptateur de précision en inox pour flacon Ø XX Réalisation sur demande suivant diamètre et hauteur du flacon	AD-RO- XX



Faites graver les deux faces de votre cache de sécurité avec le texte de votre choix !

exemple :



N'HÉSITÉZ PAS À NOUS CONTACTER :

Lundi au vendredi
09h⁰⁰ - 12h⁰⁰
14h⁰⁰ - 18h⁰⁰

ACTION EUROPE
43, rue des Violettes
68390 Sausheim
France

+33 (0) 3 89 45 62 16

Directeur commercial :
info@actioneurope.fr

Information générale :
guillaume.gargowitsch@actioneurope.fr

